

ÍNDICE


Descripción	2
Prestaciones y ajustes	3
Opciones	5
Ficha técnica	7
Video e información web	8

Deshazte de tensiones con TENSOR

¿Estrés? ¿Ansiedad? ¿Cansancio? ¿Mala circulación?
¿Dolores musculares? ¿Retención de líquidos?

Conoce todos los detalles y prestaciones de una camilla que permite combinar los beneficios relajantes del spa con el tratamiento de dolencias leves.

Descubre la camilla de SPA
Tensor en el interior.

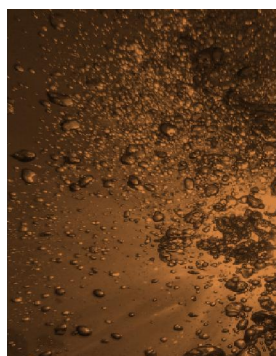

Descripción

La camilla Tensor ha sido especialmente diseñada para realizar tratamientos de cuerpo entero y se integra perfectamente en espacios de Wellness y Spa. De óptica elegante y minimalista, su blando colchón de pieza única y de unos 13 cm de grosor ofrece un gran confort a los pacientes. Los bordes redondeados y el tacto del tapizado transmiten una sensación de relajación y bienestar en cualquier ambiente.

Se trata de una camilla de 3 cuerpos que dispone de 4 motores para regular la altura y la inclinación del respaldo, del reposapiés y la de toda la camilla, lo que permite colocarla en posición de Trendelenburg y antitrendelenburg.



Las elegantes columnas de aluminio o lacadas en marrón aportan máxima estabilidad a la camilla.

La estructura de la camilla está revestida con el mismo material del colchón, dando un acabado de alta calidad.



Prestaciones

A través del mando de serie o del mando de pie (opcional), se pueden regular prácticamente todos movimientos de la camilla.



El amplio recorrido en altura (68cm a 89cm) facilita el acceso a los pacientes.



La inclinación del reposapiés y del respaldo posibilitan un amplio abanico de tratamientos boca arriba.



La posición de Antitrendelenburg facilita la salida de la camilla a pacientes con movilidad reducida o de edad avanzada.



La posición de Trendelenburg es muy utilizada en tratamientos de drenaje linfático, para mejorar la circulación de la sangre y la retención de líquidos en las piernas.




El reposacabezas está dotado de agujero facial para más comodidad del paciente en tratamientos boca abajo.



Los apoyabrazos se regulan en altura mediante pistón de gas y también son una ayuda al profesional durante los masajes faciales.



Ajustes de posición

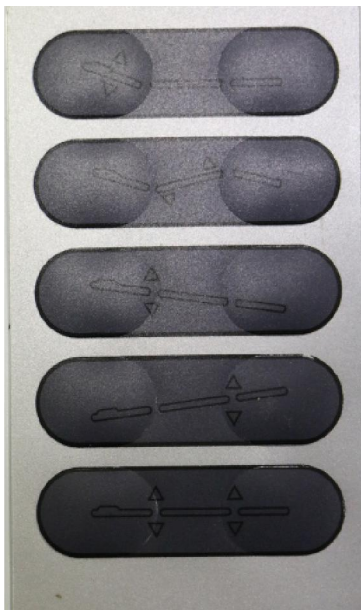

Pulsando el **botón superior** se regula la inclinación del **respaldo**.

Pulsando el **segundo botón** se regula la inclinación del **reposapiés**.

Pulsando el **tercer botón** se regula la inclinación completa de la camilla, en posición de **Trendelenburg**.

Pulsando el **cuarto botón** se regula la inclinación completa de la camilla, en posición de **Antitrendelenburg**.

Pulsando el **quinto botón** se regula la **altura** de la camilla.

Opciones

BASE MARRÓN

Ya está disponible en estoc la referencia **Tensor BROWN BASE**, camilla de tapizado blanco y base lacada en marrón.



FUNDA DE CAMILLA

Protege tu camilla con la funda de 4 partes especialmente diseñada para Tensor.



RUEDAS DE GOMA

Para poder asegurar el desplazamiento de la camilla Weelko ofrece ruedas de goma con freno y giratorias en 360°.



Completa tu espacio

Los carritos de madera en blanco y marrón complementan el espacio de tu camilla Tensor.

EASY+ (Ref. 1019)



ASSIST (Ref. 1034)



HANDY (Ref. 1032)





VANTAGE (Ref. 1033)



Ficha técnica

Altura	68 / 89 cm
Ancho	76 cm
Longitud total	198 cm
Dimensiones base	121x54 cm
Espesor del cojín	13 cm
Ángulo de ajuste respaldo	0°~+70°
Ángulo de ajuste reposapiés	0°~-20°
Apoyabrazos regulable	Sí, en altura (±10 cm)
Agujero facial	Sí
Carga máxima admisible	200 kg
Tapizado	PU
Número de motores	4
Mando	Sí (de serie)
Ruedas	opcional
Referencia	2249 / 2249 brown base
Voltaje	220 V / 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo	0,12 kWh
Peso neto	104 kg
Peso bruto	124 kg
Tamaño embalaje	204x81x72 cm
Montaje	se entrega montada

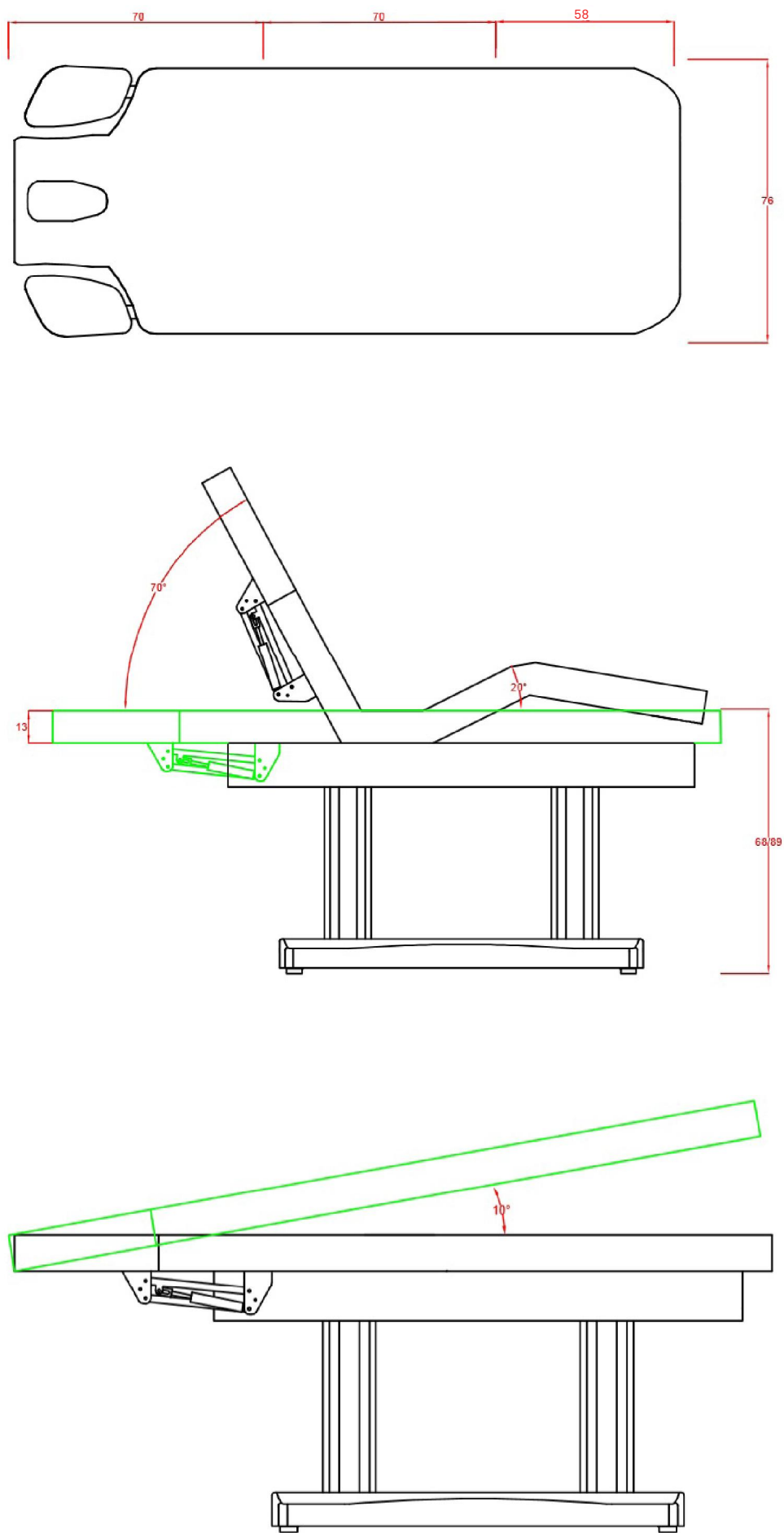

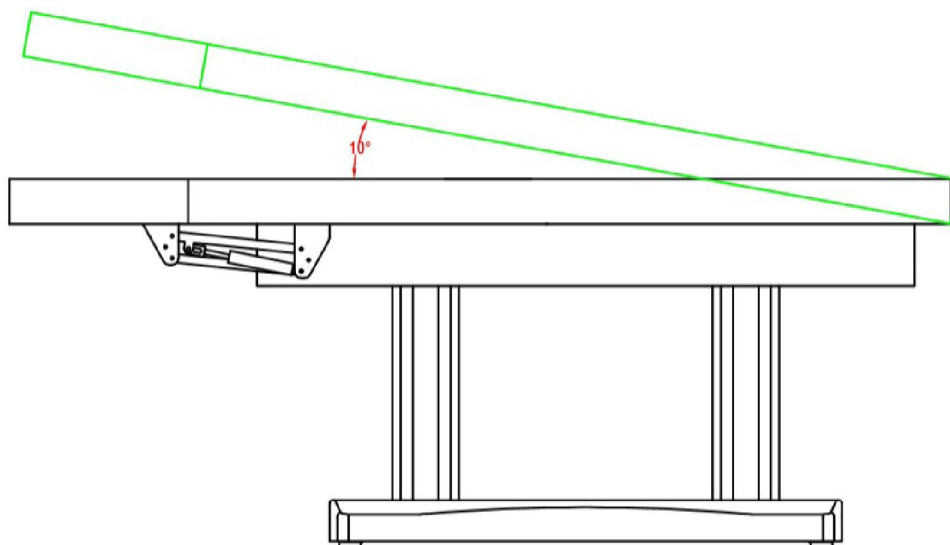


Video e información web

Para conocer todas las particularidades de la camilla y ver bien de cerca todos los detalles está a tu disposición un video que recoge todas las prestaciones y donde se pueden apreciar por ejemplo la calidad de los acabados.

A través de los canales vimeo y youtube puedes no solo reproducir el video sino también descargarlo y utilizarlo con tus clientes o publicarlo a través de tus canales habituales de venta*.

Y recuerda que Weelko publica regularmente videos e informaciones técnicas sobre sus productos. ¡No te lo pierdas!

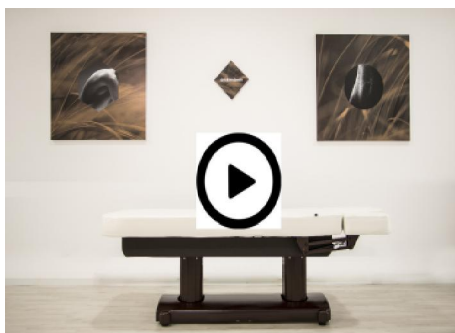


*Weelko Barcelona autoriza el uso del material gráfico y de video para fines comerciales siempre y cuando no sufra ninguna modificación ni recorte.



Visita nuestro TECHNICAL INFO y descárgate toda la información técnica y comercial que puedas necesitar. Fotografías, dossiers, fichas técnicas, etc. ¡No te lo pierdas!

Dossiers | Technical Zoom

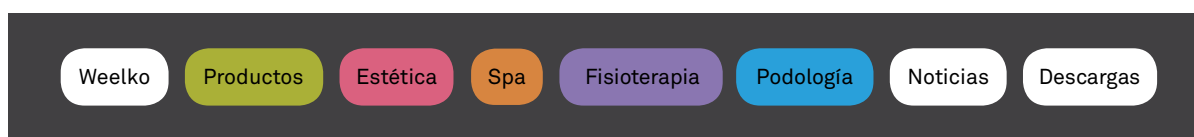

Enciende la WEELKO TV desde weelko.com y descubrirás de cerca la camilla de SPA **Tensor** ¡Para quienes prefieren una imagen a mil palabras!



vimeo

You Tube



Presoterapia Weelko



Demo sillón de spa Caln



Microdermabrasion Weelko

weelko.com

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 90 20