

INDEX


Description	2
Prestations et réglages	3
Options	5
Fiche technique	7
Vidéo et information site web	8

Éliminez le stress avec **TENSOR**

Du Stress? De l'anxiété? De la fatigue? De la
mauvaise circulation? Des douleurs musculaires?
De la rétention d'eau ?

Découvrez tous les détails et les
prestations d'une table qui permet
de combiner les bienfaits calmants
du spa avec le traitement des dou-
leurs légers.

Dénichez la table SPA
Tensor à l'intérieur

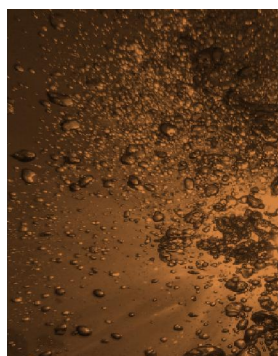

Description

La table Tensor a été particulièrement conçue pour la réalisation de traitements de corps entier, elle s'intègre parfaitement dans tous les espaces Wellness et Spa. Avec un aspect élégant et minimaliste et son matelas mou d'une seule pièce de 13cm d'épaisseur, elle offre un grand confort aux patients. Les bords arrondis et le toucher du revêtement transmettent une sensation de calme et bien-être dans n'importe quelle atmosphère.

Il s'agit d'une table à 3 sections et à 4 moteurs pour régler la hauteur, l'inclinaison du dossier, du repose-pieds et celle de toute la table, ce qui permet de la placer en position Trendelenburg et Antitrendelenburg.



Les élégantes colonnes en aluminium ou laquées en marron apportent une stabilité maximale à la table.

La structure de la table est revêtue avec le même matériel que le matelas, en lui apportant une finition de haute qualité.



Prestations

Grâce à la télécommande, qui va avec la table, ou la pédale (en option), l'on peut régler presque tous les mouvements de la table.



Le large parcours en hauteur (de 68cm à 89cm) facilite l'accès aux patients.



L'inclinaison du repose-pieds et du dossier permettent un large éventail de traitements sur le dos.



La position Antitrendelenburg facilite la sortie de la table aux patients à mobilité réduite ou aux personnes âgées.



La position Trendelenburg est très utilisée pour des traitements de drainage lymphatique, afin d'améliorer la circulation sanguine ou la rétention de liquides aux jambes.




L'appui-tête est équipé d'un trou visage pour un plus de confort du patient en traitements sur le ventre.



Les repose-bras se règlent en hauteur grâce à un vérin à gaz, ils servent aussi d'aide au professionnel pendant les massages faciaux.



Réglages de position

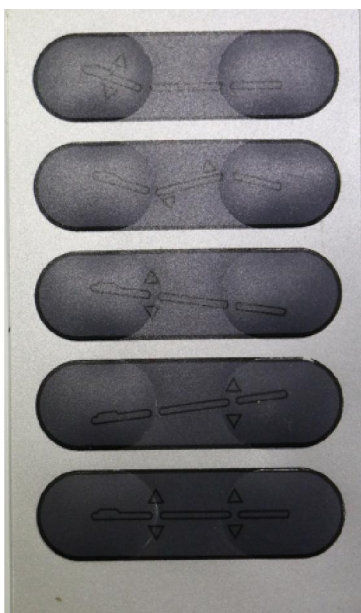

En appuyant sur le bouton supérieur, on règle l'inclinaison du **dossier**.

En appuyant sur le deuxième bouton, on règle l'inclinaison du **repose-pieds**.

En appuyant sur le troisième bouton, on règle l'inclinaison complète de la table en position **Trendelenburg**.

En appuyant sur le quatrième bouton, on règle l'inclinaison complète de la table, en position **Antitrendelenburg**.

En appuyant sur le cinquième bouton, on règle la **hauteur** de la table.

Options

BASE MARRON

La référence **Tensor BROWN BASE** est déjà disponible en stock, c'est la table avec revêtement en blanc et la base laquée en marron.



HOUSSE DE TABLE

Protégez votre table avec une housse à 4 parties spécialement conçue pour Tensor.



ROUES EN CAOUTCHOUC

Afin de pouvoir assurer le déplacement d'une table Weelko, elle est équipée de roulettes tournantes à 360° en caoutchouc et à freins.



Compléter votre espace

Les guéridons en bois couleur blanc et marron complètent l'espace de votre table Tensor.

EASY+ (Réf. 1019)



ASSIST (Réf. 1034)



HANDY (Réf. 1032)





VANTAGE (Réf. 1033)



Fiche Technique

Hauteur	68 / 89 cm
Largeur	76 cm
Longueur totale	198 cm
Dimensions de la base	121x54 cm
Épaisseur du matelas	13 cm
Réglage de l'angle dossier	0°~+70°
Réglage de l'angle repose-pieds	0°~-20°
Repose-bras réglable	Oui, en hauteur (±10 cm)
Trou visage	Oui
Charge maximale	200 kg
Revêtement	PU
Numéro de moteurs	4
Télécommande	Oui (de série)
Roues	En option
Référence	2249 / 2249 brown base
Voltage	220 V / 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation	0,12 kWh
Poids net	104 kg
Poids brut	124 kg
Dimensions	204x81x72 cm
Montage	Livrée montée

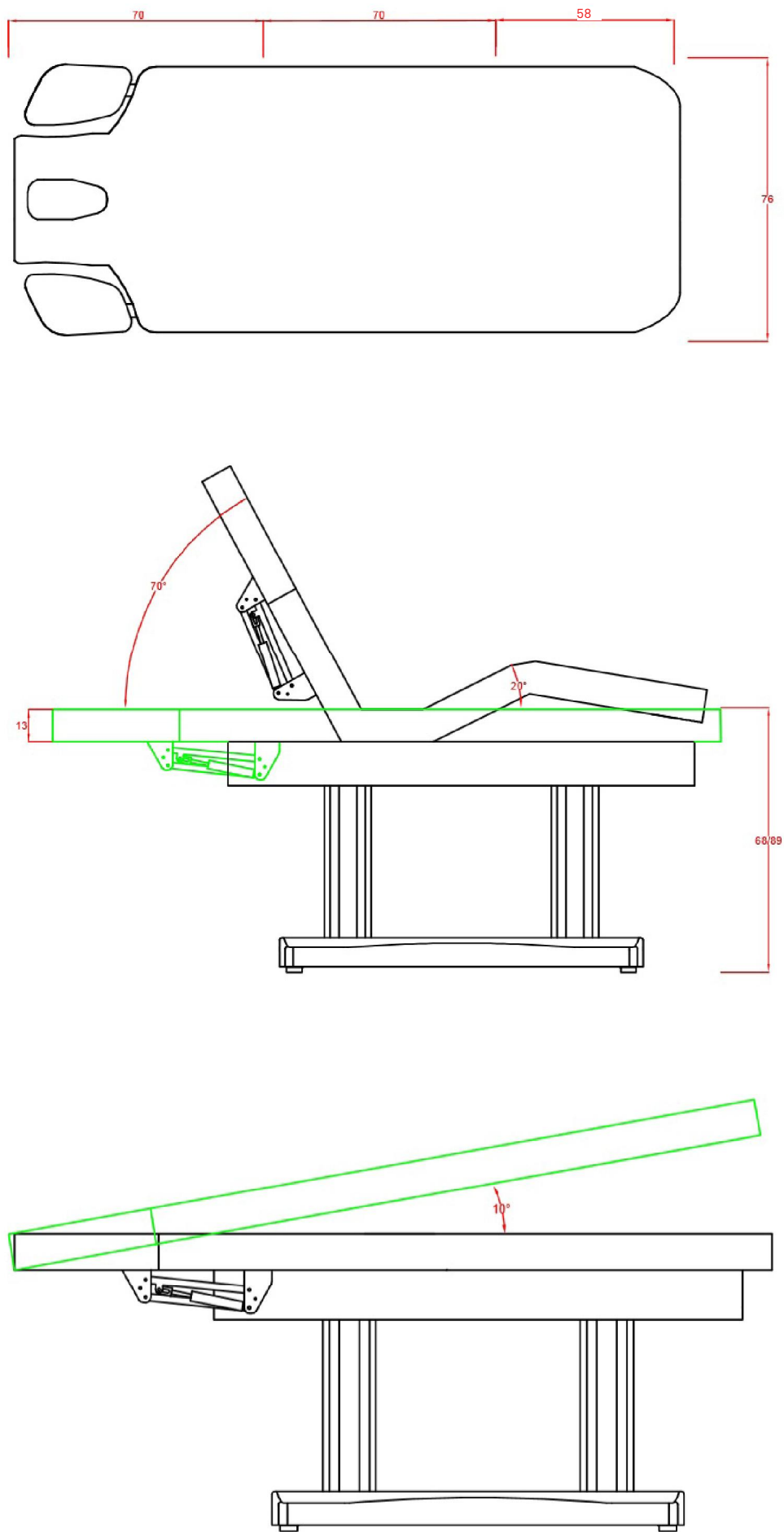

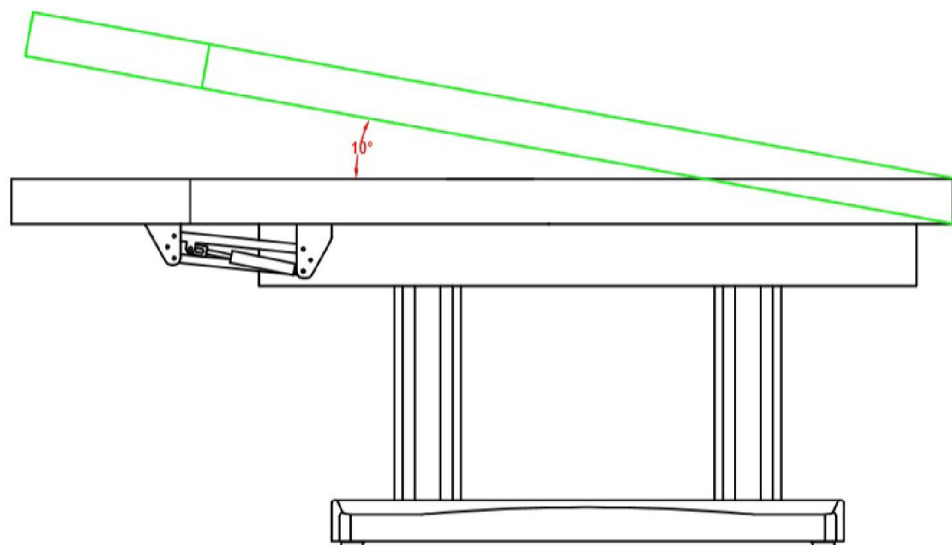


Vidéo e information site web

Pour mieux connaître les particularités de la table et voir de près tous les détails, on a mis à votre disposition une vidéo qui résume toutes les prestations de cette table et en la regardant vous apprécierez, par exemple, la qualité des finitions.

Grâce aux chaînes Vimeo et Youtube vous pourrez reproduire la vidéo, mais aussi la télécharger et l'utiliser parmi vos clients ou même la publier à travers vos circuits de vente.*

Et rappelez-vous que Weelko publie de manière régulière des vidéos et des informations techniques sur ses produits. À ne pas manquer !

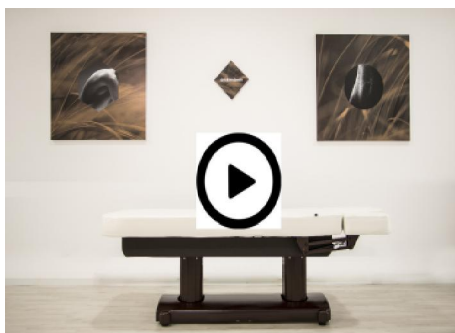

*Weelko Barcelona autorise l'usage de matériel graphique et vidéo dont vous pouvez en avoir besoin pour des fins commerciales et à condition que ce matériel ne soit pas modifié.



TECHNICAL INFO
Descargas

Visitez notre TECHNICAL INFO et téléchargez toute l'information technique et commerciale que vous pourriez souhaiter. Photos, dossiers, fiches techniques, etc. À ne pas les rater!

Dossiers | Technical Zoom

Weelko

Produits

Beauté

Spa

Kinésithérapie

Podologie

News

Downloads



Allumez la TV WEELKO depuis weelko.com et vous découvrirez de plus près la table SPA **Tensor**. Une image est plus parlante que 1000 mots.



WEELKO
TV

vimeo

You Tube



weelko.com

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 90 20