

VERZEICHNIS


Beschreibung	2
Leistungen und Stellungen	3
Optionen und Zubehör	5
Technische Daten	7
Video und Information Web	8

Bauen Sie Stress mit **TENSOR** ab

Stress? Müdigkeit? **Durchblutungsstörungen?**
Muskelschmerzen? **Schwere Beine?** Innere Unruhe?
Verspannungen?

Schauen Sie auf alle Details und Funktionen von einer Liege, die die Vorteile vom wohltuenden Spa mit der Behandlung von kleinen Beschwerden kombinieren lässt.

Entdecken Sie die Spaliegge **Tensor** gleich!

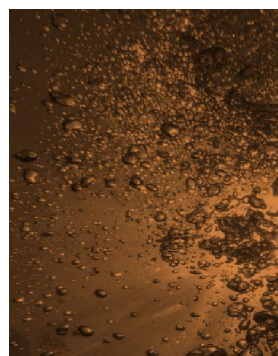

Beschreibung

Die Liege Tensor wurde speziell designt, um Ganzkörperbehandlungen durchzuführen und fügt sich problemlos in jeder Wellness und Spa Ambiente ein. Mit einer sehr eleganten und minimalistischen Optik, die weiche durchgehende Matratze -mit einer 13 cm starken Polsterung- bietet größten Komfort zu den Patienten. Die abgerundete Kanten und die angenehme Polsterung vermitteln ein Gefühl von Relax und Wohlbefinden in jedem Raum.

Es handelt sich um eine 3-teilige Liege mit 4 Motoren, um die Höhe und die Neigung der Rückenlehne, des Fußteiles und die Neigung der ganzen Liege zu regulieren. Somit kann die Liege in Trendelenburg und Antitrendelenburg verstellt werden.



Die elegante Säulen aus Aluminium oder braun lackiert verleihen der Liege maximale Stabilität.

Die Struktur der Liege ist mit dem gleichen Polsterbezug wie der Matratze verkleidet und hat eine Feinstbearbeitung.



Leistungen

Mit der serienmäßigen Handfernbedienung oder mit dem Fußschalter können fast alle Bewegungen der Liege reguliert werden.



Die Höhenverstellung (68 cm bis 89 cm) vereinfacht den Patienten den Zugang zu der Liege.



Die Neigung der Rückenlehne und des Fußteils ermöglichen viele Behandlungen rücklings.



Die Antitrendelenburg Position erlaubt einen einfachen Abgang zu älteren Patienten mit eingeschränkter Beweglichkeit.



Die Trendelenburg Position wird sehr häufig bei lymphatischer Drainage angewendet, um die Durchblutung zu verbessern und gegen Wassereinlagerung.




Das Kopfteil verfügt über Gesichtsausschnitt, um den Patienten höchsten Komfort bei Behandlungen bäuchlings zu bieten.



Die Armlehnen können mittels Gasdruckfeder in der Höhe verstellt werden und können auch den Profis bei Gesichtsbehandlungen behilflich sein.



Verstellungen

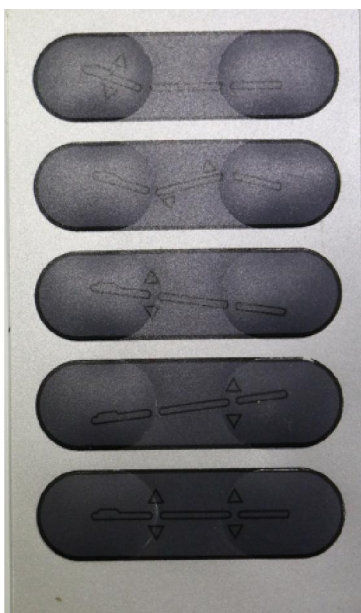

Drücken Sie auf beide **obere Tasten**, um die Neigung der **Rückenlehne** zu regulieren.

Drücken Sie auf beide **zweite Tasten**, um die Neigung des **Fußteils** zu regulieren.

Drücken Sie auf beide **dritte Tasten**, um die Neigung der gesamten Liege zu regulieren (Position **Trendelenburg**).

Drücken Sie auf beide **vierte Tasten**, um die Neigung der gesamten Liege zu regulieren (Position **Antitrendelenburg**).

Drücken Sie auf beide **untere Tasten**, um die **Höhe** der Liege zu regulieren.

Optionen und Zubehör

BRAUNE BASIS

Das Modell **Tensor BROWN BASE** ist bereits auf Lager und sofort lieferbar. Es handelt sich um eine Liege mit weißer PU Polsterung und braun-lackierter Basis.



FROTTEEBEZUG

Schützen Sie Ihre Liege mit dem 4-teiligen extra für Tensor angepassten Bezug.



GUMMIRÄDER

Um die Beweglichkeit der Liege zu ermöglichen, bietet Weelko 360° drehbare Gummiräder mit Bremse.



Vervollständigen Sie Ihren Raum

Die Holzwagen in weiß und braun ergänzen Ihren Wohlbefindensraum mit Tensor.

EASY+ (Ref. 1019)



ASSIST (Ref. 1034)



HANDY (Ref. 1032)





VANTAGE (Ref. 1033)



Technische Daten

Höhe	68 / 89 cm
Breite	76 cm
Gesamtlänge	198 cm
Abmessungen der Basis	121x54 cm
Dicke der Matratze	13 cm
Neigung der Rückenlehne	0°~+70°
Neigung der Fußteils	0°~-20°
Verstellbare Armlehnen	Ja, in der Höhe (±10 cm)
Gesichtsausschnitt	Ja
Belastbarkeit	200 kg
Polsterbezug	PU
Anzahl der Motoren	4
Handfernbedienung	Ja (serienmässig)
Räder	als Zuberhör erhältlich
Bezeichnung	2249 / 2249 brown base
Voltage	220 V / 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Verbrauch	0,12 kWh
Netto Gewicht	104 kg
Brutto Gewicht	124 kg
Verpackungsmaßen	204x81x72 cm
Montage	wird montiert zugestellt

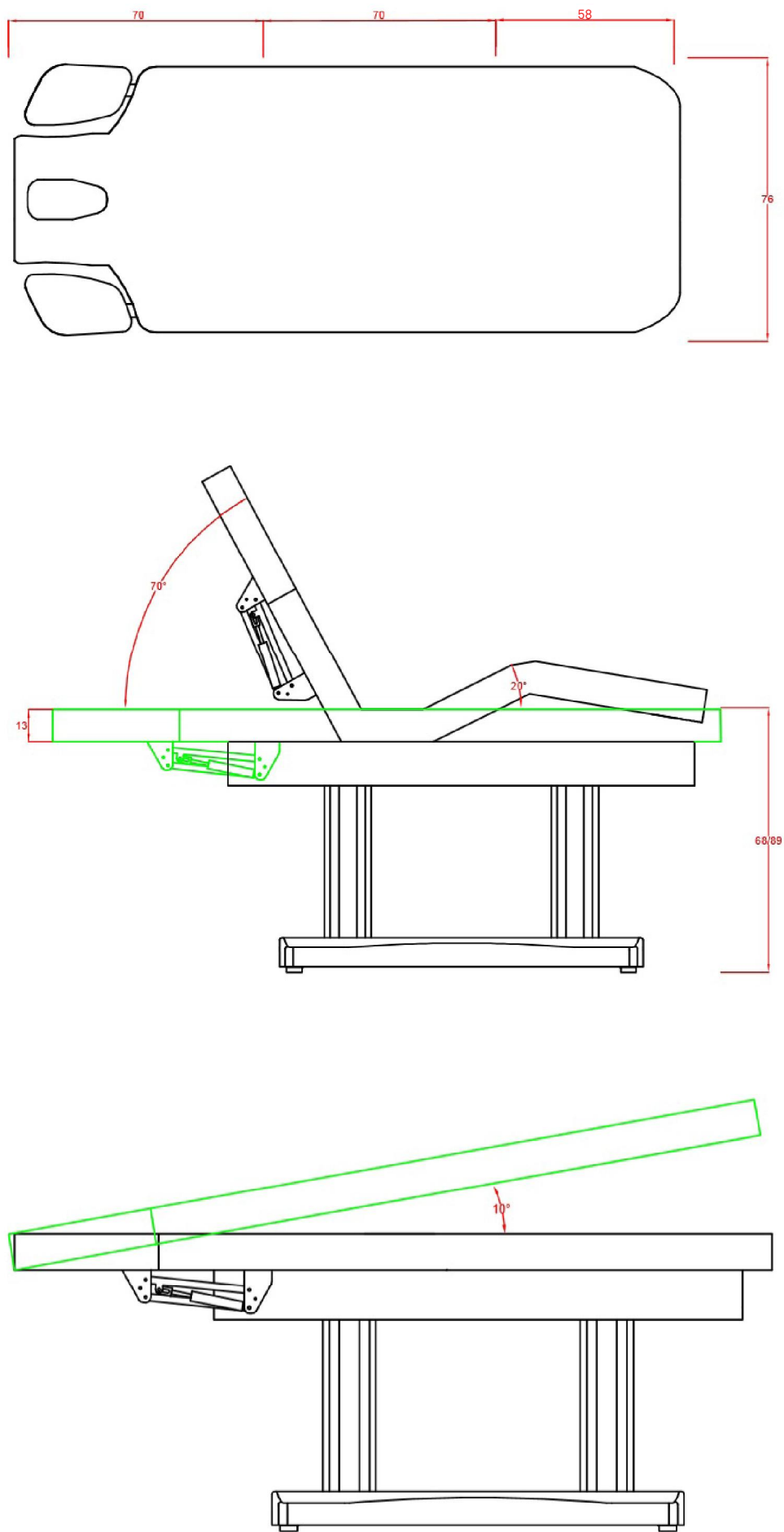

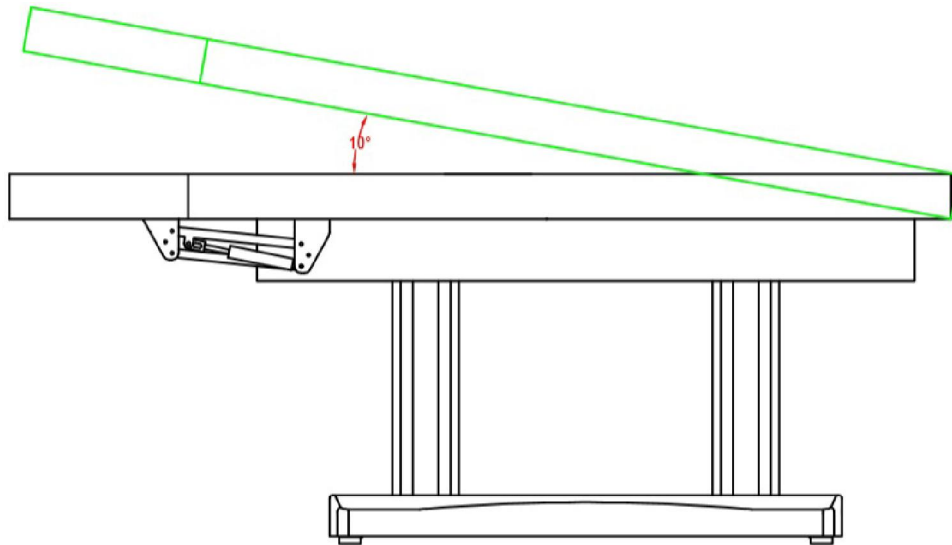


Video und Information Web

Um alle Besonderheiten dieser Liege zu entdecken und alle Details aus der Nähe zu betrachten, steht ein Video zur Verfügung, das alle Leistungen und die Qualität der Feinstbearbeitung zeigt.

Bei den Videokanälen Vimeo und YouTube kann man das Video nicht nur abspielen sondern auch es runterladen und mit Kunden verwenden oder bei den gänglichen Verkaufskanälen veröffentlichen*.

Und vergessen Sie nicht, dass Weelko Videos und technische Dossiers über ihre Produkte regelmäßig veröffentlicht. Nicht verpassen!

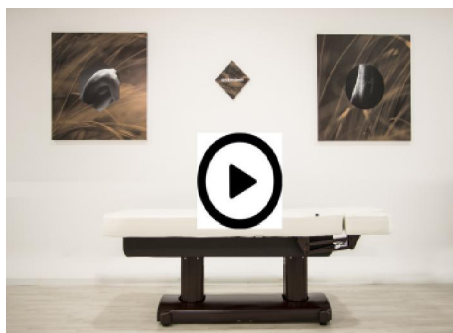


*Weelko Barcelona stimmt der Verwendung der Grafik-und Videomaterial für gewerbliche Zwecke zu, sofern keine Änderungen oder Schnitte vorgenommen werden.



Besuchen Sie unsere TECHNICAL INFO auf unserer Webseite und laden Sie alle technischen Informationen und Verkaufsmaterialien runter. Fotos, Dossiers, technische Daten, usw. Nicht verpassen!

Dossiers | Technical Zoom

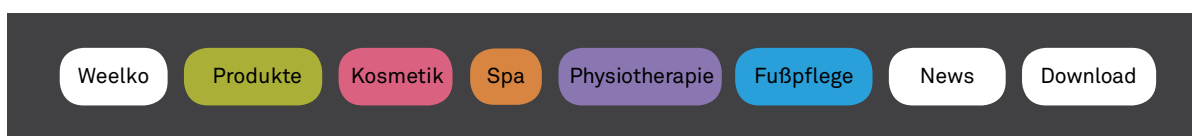

Schalten Sie WEELKO TV auf weelko.com ein und Sie werden die Spaliese **Tensor** aus der Nähe betrachten können. Für alle die lieber ein Bild wie tausend Worte haben!



vimeo

You Tube



weelko.com

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 90 20