



weelko

HighTech Air WKB001

Pressothérapie



HighTech Air WKB001


Pressothérapie

Avis: Les appareils arrivent avec une protection adhésive en plastique très fine qui protège l'écran contre possibles rayures pendant l'emballage. Retirez cette protection dès réception de l'appareil.

APPAREIL

- Botte droite + gauche.
- Jambe droite + gauche.
- Ceinture abdominale.
- Bras droit + gauche.
- Couverture pour ranger les câbles et tuyaux.
- Unité principale.



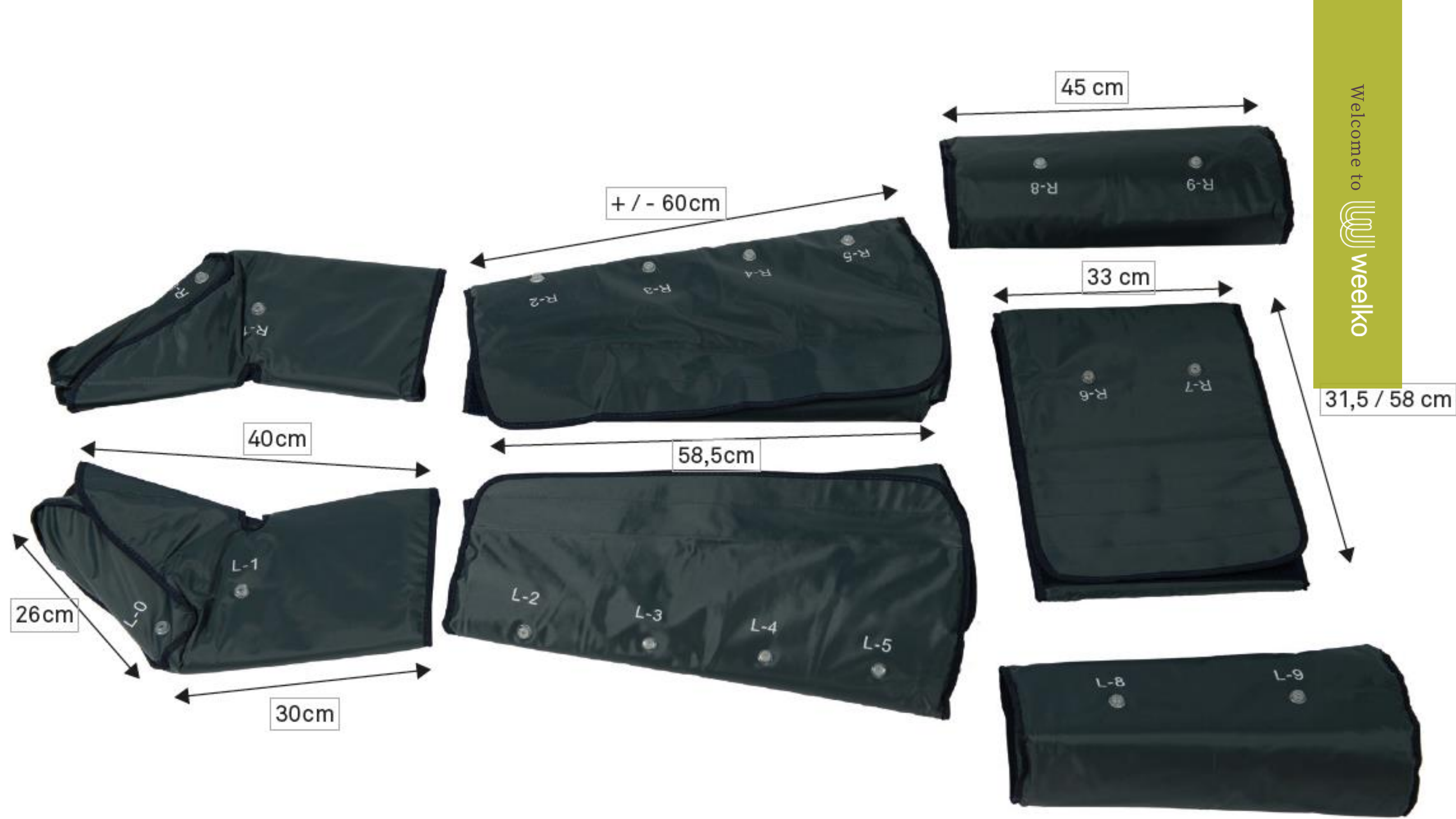

Notre WKB001 est un appareil digital d'esthétique avec écran tactile de pressothérapie. Robe composée de bottes, jambes, ceinture abdominale et bras. En plus, il inclut une couverture pour ranger les câbles. Il est idéal pour des traitements à améliorer la circulation, faciliter l'élimination de graisse moyennant l'activation du drainage lymphatique, ainsi que l'oxygénation cellulaire et la détente musculaire. Il sera notre principal allié pour les traitements corporels.



HighTech Air WKB001

Pressothérapie

HighTech Air

WKB001

Pressothérapie

Pour brancher l'appareil correctement, il faudrait se faire sur le panneau arrière. De gauche à droite, vous devez suivre les instructions suivantes:

- Branchez le cordon d'alimentation (200-240V 50Hz).
- Branchez correctement les tuyaux sur le panneau arrière. Suivez les numéros indicatifs. Il y a 3 raccordements.
- Placez la couverture avec les câbles sur une surface plate pour que le client puisse s'y allonger. Protégez la couverture avec un papier jetable afin de garantir les conditions hygiéniques appropriées.
- Enveloppez le client dans la robe. Rappelez-vous d'utiliser une robe jetable en dessous de la robe de la pressothérapie, ainsi que bien la nettoyer après chaque utilisation.



Pour allumer l'appareil, il faut appuyer sur le bouton du panneau frontal et taper sur le logo Weelko qui apparaît sur l'écran pour procéder à choisir les menus souhaités. Choisissez “pressotherapy” pour commencer à travailler.

La pressothérapie

Il s'agit d'une technique non-invasive ni douloureuse, qui contribue aux traitements d'esthétique qui cherchent une stimulation du système lymphatique et circulatoire et devient ainsi un complément excellent dans un centre de soins.

Son système de compression est conçu pour augmenter le flux veineux et lymphatique en améliorant le retour veineux. Il aide à promouvoir les fonctions naturelles de nettoyage de toxines du corps. La revitalisation et oxygénation sont sans doute une conséquence du traitement avec notre appareil en obtenant une perte de poids et une redéfinition des jambes, ceintures et bras tandis que le tonus de la peau améliore aussi.

La quantité de séances peut osciller entre 2 et 3 par semaine et dépendra du type de traitement et des résultats souhaités, c'est pourquoi l'évaluation du client préalable au traitement est très importante. C'est un traitement sûr, reposant et agréable.

Pour commencer il faut choisir le type de traitement à appliquer:

Pressotherapy: activer la pressothérapie.

Mode: sur la fonction pressothérapie, le menu “MODE” permet de choisir un des quatre programmes A, B, C, D.

Level: régler l'intensité de la pression du traitement en trois niveaux: bas, moyen et haut. Il faut toujours travailler selon la tolérance du client, en commençant de moins à plus pour éviter des douleurs et en vérifiant que l'intensité soit toujours l'appropriée pendant le traitement.

Time: le temps du traitement, 30-45 minutes maximum recommandé.

Play et Pause: commencer ou pauser l'appareil quand il faut.



Welcome to


weelko




Il comprend 4 programmes:

Mode A, ce programme gonfle de la zone 0 à la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 2 se gonfle, et comme ça successivement d'un bout à l'autre en montant des pieds aux bras de façon progressive avec un temps de gonflage de 11 secondes par zone et 11 plus de repos. Cela apporte une sensation agréable de drainage doux. À la fin, il gonfle de la zone 0 à 9 et le programme commence de nouveau.

Mode B, ce programme gonfle de la zone 0 à la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 3 se gonfle, et comme ça successivement d'un côté à l'autre avec un temps de gonflage de 11 secondes, après la pression augmente sur tout le corps. À la fin, il gonfle de la zone 0 à la 9 tout au même temps et le programme recommence. La sensation est un peu plus intense et profonde, utilisé surtout pour des traitements contre la cellulite œdémateuse, graisse ou rétention de liquides, œdèmes, etc.

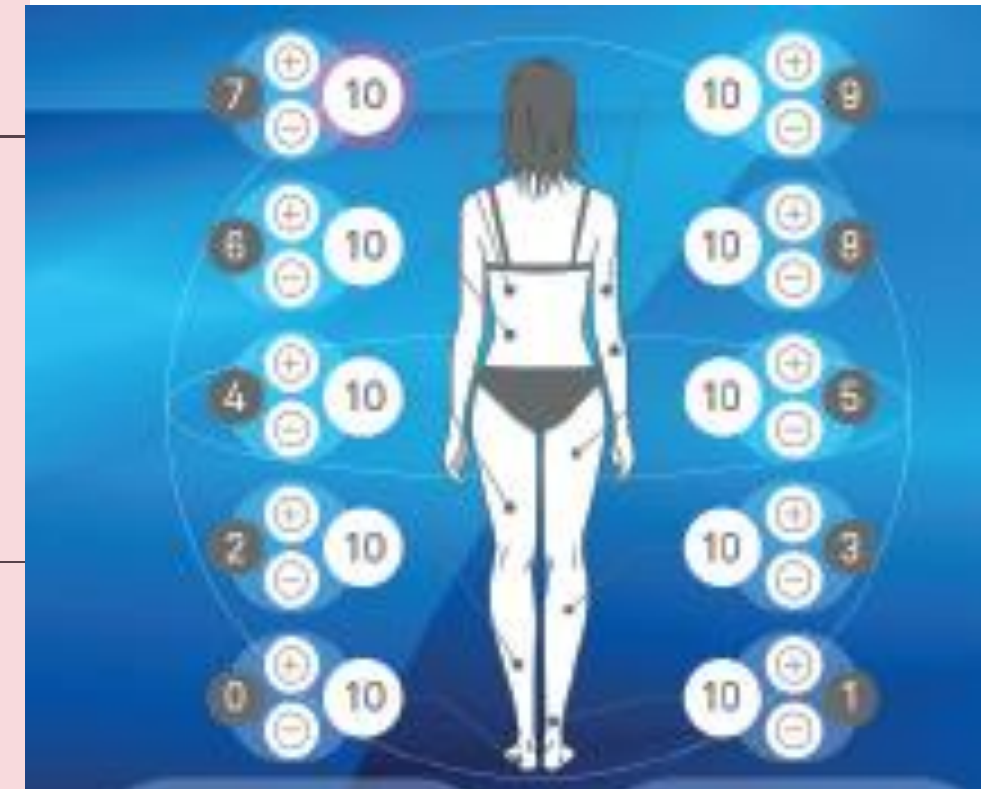

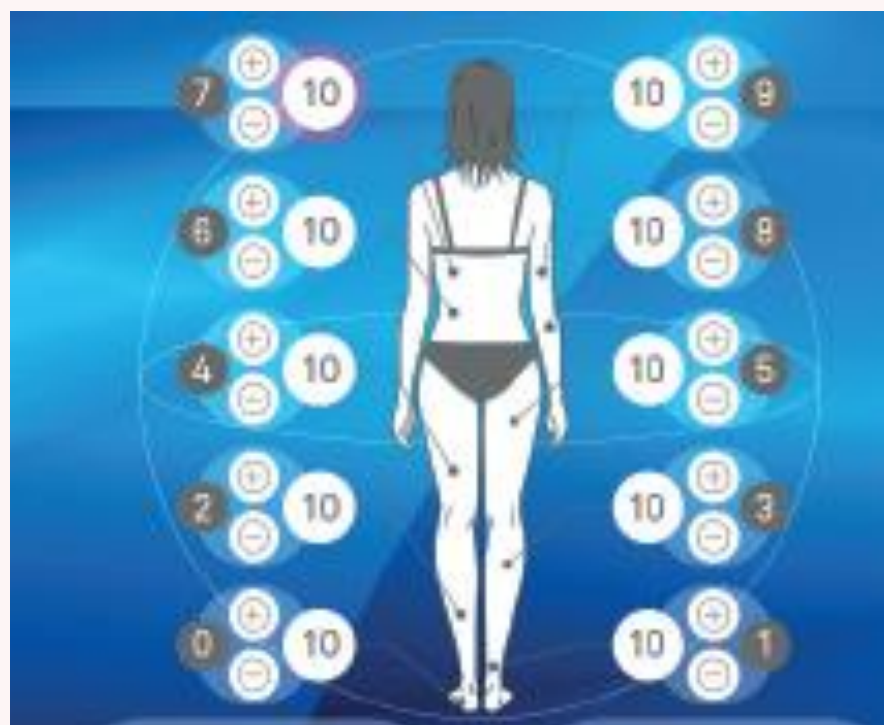


Mode C, ce type de programme gonfle de la zone 0 à la 9. Il commence à gonfler par la zone 0 et il y ajoute la zone 1, après la zone 2 et comme ça il ajoute successivement des zones au procès de gonflage, la pression d'air ne se perd pas de façon synchronique comme dans les programmes antérieurs, après il y a un temps de repos de 11 secondes et à la fin le programme recommence. La pression exercée est beaucoup plus intense et se focalise sur l'abdomen et les cuisses. Ce mode est approprié pour les clients avec la cellulite ou de la graisse localisée plus épaisse sur les cuisses et l'abdomen.

Mode D, ce programme gonfle les trois zones au même temps: jambes, abdomen et bras du bout jusqu'à la partie supérieure. C'est un mode beaucoup plus intense, focalisé sur l'abdomen et les bras. Il est approprié pour la lourdeur abdominale et la rétention de liquides aux bras.

Vous pouvez aussi travailler des zones indépendantes sans utiliser un de ces modes. L'appareil permet de choisir chaque partie de la robe et régler l'intensité et la zone à traiter de façon indépendante. Vous devez seulement appuyer sur le bouton de la zone et régler l'intensité au moyen des touches “+” et “-”.

Mode de traitement

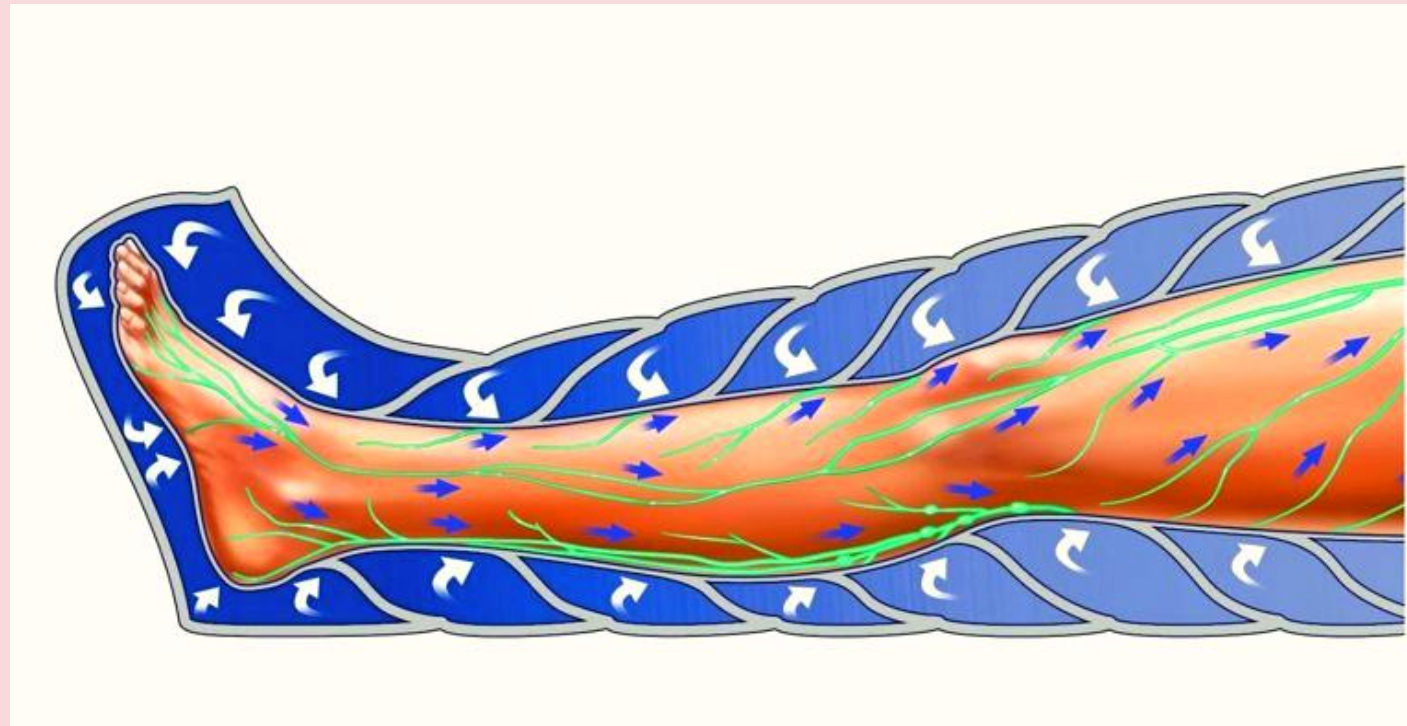


L'application de pression d'air, qui stimule le retour veineux de sang au cœur, apporte une augmentation de la circulation sanguine et lymphatique en plus d'avoir un effet relaxant et thermique.

Le client devra se placer allongé sur le dos sur la table et on procédera à l'envelopper dans la robe, soit les pieds, les jambes, la ceinture, les bras ou l'ensemble. Selon le protocole choisi, la pression d'air sera distribuée de façon ascendante le long des zones à traiter.

Soyez toujours en contact avec le client pendant le traitement afin de régler la température, la pression et le temps.

Mode d'emploi

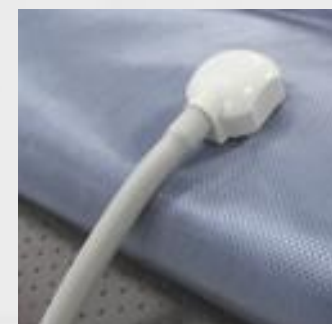

Branchez correctement les tuyaux sur le panneau arrière, il faut absolument suivre les numéros indicatifs. Les câbles gros du 0 au 9 sont pour la pressothérapie.

Il faut placer la couverture de rangement des câbles sur une surface plate pour que le client puisse s'y allonger.

Protégez la couverture avec un papier jetable pour garantir les conditions hygiéniques appropriées.

Enveloppez la robe autour du corps du client. Utilisez toujours une robe jetable en dessous de celle de la pressothérapie.

Allumez l'appareil et choisissez le traitement pressothérapie et sa puissance.

La pression de l'appareil est de 20-40KPa, 25-40L/m.

Indicaciones



- Traitements contre la rétention de liquides, œdème et lymphœdèmes.
- Traitement pour éliminer des graisses et toxines.
- Traitements de jambes lourdes.
- Contribue aux traitements pour diminuer de la graisse localisée.
- Traitements pour améliorer la circulation dans des patients qui souffrent de hypertension ou diabète.
- Améliore l'apparence de la peau d'orange.
- Traitement et prévention des signes variqueux.
- Stimulation circulatoire.
- Récupération de la circulation lymphatique postopératoire.
- Tonification musculaire.
- Oxygénation de l'organisme.

Contre-indications

Le fait qu'il soit un traitement très contrôlé implique qu'il ait peu de contre-indications. Néanmoins, il faut absolument voir avec le professionnel dans le domaine médical ou esthétique avant de l'utiliser.

- Problèmes cardiovasculaires sévères.
- Phlébite.
- Maladies infectieuses.
- Maladies de la peau et possibles infections actives.
- Maladies immunodéficientes ou patients oncologiques.
- Problèmes hormonaux.
- Les femmes enceintes peuvent seulement traiter jambes et bras. La pression d'air doit être très basse et toujours selon ordonnance médicale.
- Ne pas utiliser avec personnes avec épilepsie, avec stimulateur cardiaque ou n'importe quelle condition psychologique ou physique sérieuse.
- Il n'est pas recommandé pour des personnes en souffrant de claustrophobie.

Avertissements

- Ne serrez pas trop la robe contre le corps du client pour éviter lui faire mal si la pression d'air est très forte. Le réglage de la pression sera toujours selon tolérance.
- Si la robe est endommagée ou vieillie, veuillez la remplacer par une de neuve.
- Vérifiez avec le client que la pression d'air est appropriée le long du traitement.
- Le client devrait boire de l'eau avant et après le traitement.
- Utilisez un protecteur en cellulose sous la robe de pressothérapie pour garantir une bonne hygiène.
- Ne jetez aucun liquide sur l'appareil.
- Si besoin de manipuler ou démonter l'appareil, il faut absolument qu'il soit fait par votre distributeur avec l'autorisation du fabricant.
- En cas de dysfonctionnement, vérifiez avec attention que tous les branchements sont bien faits et contactez votre distributeur.

Yubitzay Avila

Customer Training

T. +34 93 824 9020

y.avila@weelko.com

S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.

Pol. Ind. La Valldan

Camí de Garreta, 92

08600 Berga

Barcelona – Spain

T. +34 93 824 9020

info@weelko.com

www.weelko.com



Welcome to  weelko